

Reagens Strip Test:

Uitvoering van een Urine Test op de URYXXON® Relax

Gebruik alleen verse urine monsters (binnen 2 uur na afname). Gekoelde urinemonsters moeten op kamertemperatuur worden gebracht alvorens ze te testen (15–30 °C).

Lees deze handleiding zorgvuldig en volg de instructies.


Testuitvoering



Stap 1: Schakel de analyser aan. Zorg ervoor dat de strip houder schoon is.



Stap 2: Dip teststrip in het urinemonster. Zorg ervoor dat alle test-pads nat zijn. Haal de teststrip na ca. 1 seconde uit de urine. Trek de lange zijde van de strip langs de zijkant van het reservoir om het overtollige aan urine te verwijderen. Gebruik URYXXON® teststrips.

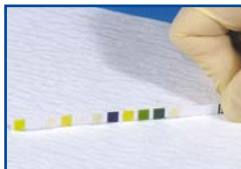

Stap 3: Tip de lange zijde van de strip even (ca. 1 sec) op een absorberend keukenpapier om het overtollige aan urine te verwijderen.



Stap 4: Plaats de teststrip op de strip houder. Zorg ervoor dat de test pads naar boven wijzen. De analyser start de meting automatisch.



Stap 5: Nadat de meting is voltooid, worden de resultaten automatisch afgedrukt.



Stap 6: Verwijder de gebruikte teststrip en reinig de striphouder.

Dagelijks onderhoud



Reinig de striphouder eenmaal daags met water en een geschikt desinfectiemiddel.

1. Zet apparaat aan d.m.v. de aan/uit schakelaar op de achterzijde (hierdoor komt striphouder automatisch uit het apparaat!).
2. Schakel hierna het apparaat weer uit (striphouder staat in uitgeschoven stand)
3. Trek nu de kunststof striphouder dmv. een lineaire beweging van de metalen ondergeleider.
4. Spoel de striphouder af met water.
5. Verwijder eventueel kristallijne afzettingen met een zachte borstel.
6. Maak de striphouder schoon met 70% alcohol of geschikte desinfectiemiddel.
7. Plaats de striphouder weer terug in het apparaat.



LET OP: bij terugplaatsing van de striphouder deze ca. 1,5 cm. over metalen ondergeleider plaatsen en druk deze hierna voorzichtig volledig in het apparaat terug!

Zie ook de afbeeldingen in gebruiksaanwijzing bij hoofdstuk 10.

8. Apparaat is nu weer klaar voor gebruik.

Kwaliteitscontrole

Controleer op negatieve en positieve tests wanneer een nieuwe teststriptube wordt geopend. Gebruik geen water voor negatieve controle.

Vervanging van printerpapier



1. Open klep van de printer door op het gestructureerde gebied naast de papier-sleuf te drukken. Verwijder de oude papierrol.
2. Plaats de nieuwe rol printerpapier.
3. Rol ca. 10 cm papier af.
4. Sluit het klepje.



Technische service

Zijn er na het lezen van de handleiding nog vragen of als u technische ondersteuning nodig heeft, neem dan contact op:

MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG

Neumann-Neander Str. 6–8
52355 Düren
Duitsland

E-Mail: pclaessens@mn-net.com

Tel.: (0031) 478 561 200

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL

www.mn-net.com



MACHEREY-NAGEL



MACHEREY-NAGEL GmbH & Co. KG · Neumann-Neander-Str. 6–8 · 52355 Düren · Duitsland
Duitsland
en International:
Tel.: +49 24 21 969-0
Fax: +49 24 21 969-199
E-mail: info@mn-net.com

Zwitserland:
MACHEREY-NAGEL AG
Tel.: +41 62 388 55 00
Fax: +41 62 388 55 05
E-mail: sales-ch@mn-net.com

Frankrijk:
MACHEREY-NAGEL EURL
Tel.: +33 388 68 22 68
Fax: +33 388 51 76 88
E-mail: sales-fr@mn-net.com

