

Caractéristiques Denta-Pro

1 micromoteur électrique avec éclairage LED (0-40'000)

Spray interne

Fonctionnement droite/gauche

1 détartreur piézo-ultrasonique avec éclairage LED

Reconnaissance automatique des instruments

Réglage en continu de la puissance du moteur et du détartreur via un bouton tournant

Réglage en continu du débit d'eau via un bouton tournant

1 réservoir d'eau de spray : 1 litre

Filtre à eau

1 pédale

Chaque instrument est réglable individuellement

Caractéristiques Minimax-Vac

1 tuyau d'aspiration haute puissance 300 l/min

1 bouton tournant pour réglage en continu

Technologie unique de BPR Swiss

Avec adaptateur pour tuyau et crachoir

1 récipient d'aspiration : 1 litre (arrêt automatique une fois rempli)

1 housse de transport DENTA-BAG

Caractéristiques techniques

Poids DENTA-PRO : 2,3 kg (poids avec DENTA-BAG et pédale : 3,6 kg)

Dimensions DENTA-PRO : 275 mm x 130 mm x 130 mm

Poids MINIMAX-VAC : 3,9 kg (poids avec DENTA-BAG 4,5 kg)

Dimensions MINIMAX-VAC : 190 mm x 140 mm x 285 mm

Dimensions housse de transport : 300 mm x 275 mm x 275 mm

Garantie : 2 ans

Options : contre-angles, DENTA-TROLLEY, DENTA-CASE etc.

Denta-Pro & Minimax-Vac


Duo de haute performance, petit et léger

Le DENTA-PRO est votre partenaire fiable, performant et simple d'utilisation dans le domaine des soins dentaires mobiles.

Pour la mise en service, branchez simplement le DENTA-PRO sur une prise de courant. Le DENTA-PRO ne pèse que 2,3 kilogrammes, mais son moteur électrique intégré avec éclairage LED et son détartreur électrique avec éclairage LED offrent une pleine puissance et peuvent être utilisés en fonctionnement continu. Outre la fiabilité et la puissance, l'efficacité du DENTA-PRO est également soutenue par la reconnaissance automatique des instruments.

Le MINIMAX-VAC pose de nouveaux jalons en matière d'unités d'aspiration mobiles autonomes.

Pour activer le MINIMAX-VAC, il vous suffit de le brancher sur une prise de courant. Avec un poids de 3,9 kilogrammes seulement (!), le MINIMAX-VAC offre une puissance d'aspiration de 300 l/min (!), comparable à celle d'une unité de soins fixe dans un cabinet dentaire. La puissance d'aspiration peut être réglée en continu à tout moment. Ces caractéristiques révolutionnaires permettent d'employer le MINIMAX-VAC dans de nombreux domaines, notamment dentisterie mobile, cabinets dentaires ainsi que de nombreux autres secteurs médicaux.

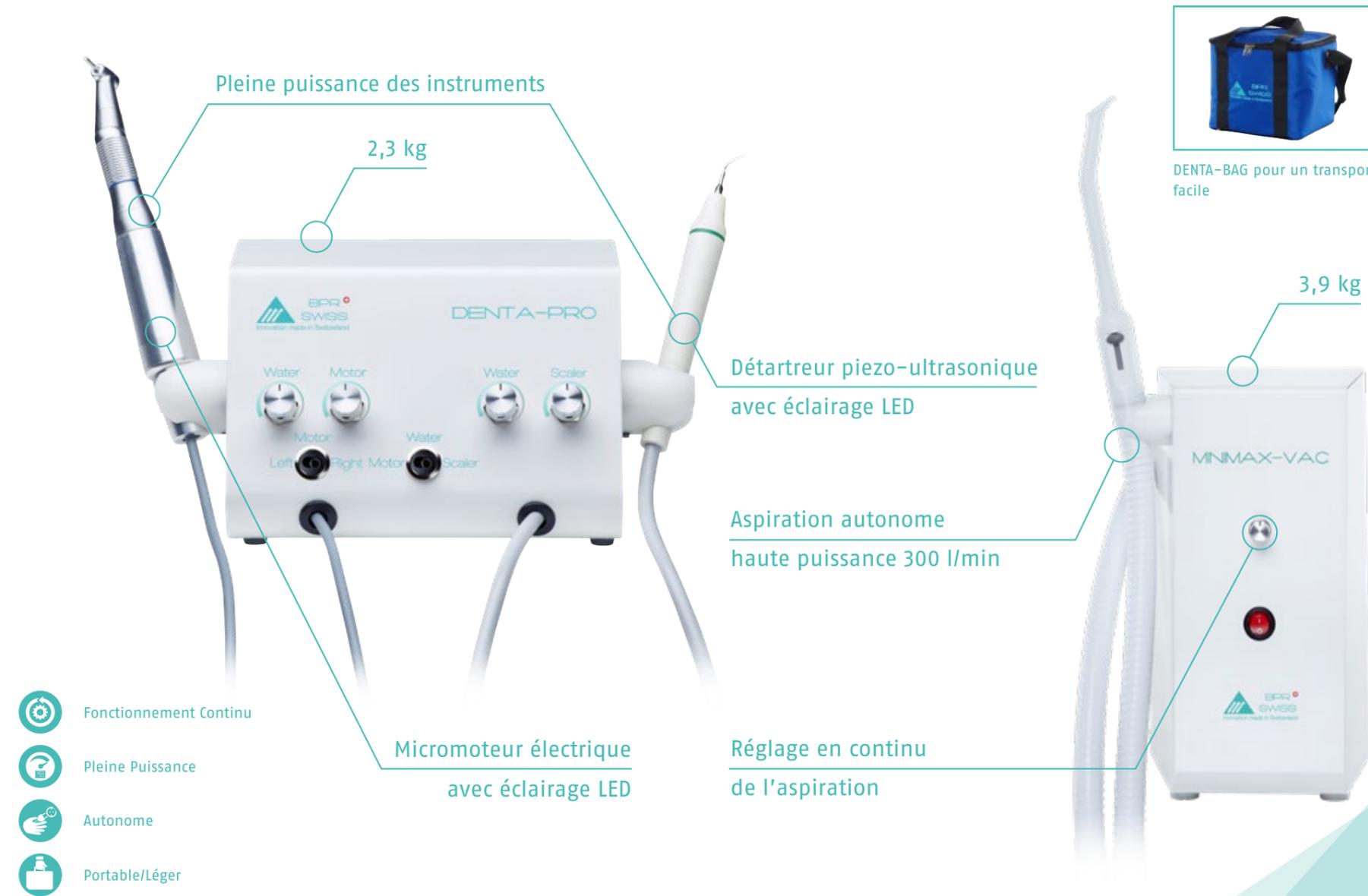

- Fonctionnement Continu
- Pleine Puissance
- Autonome
- Portable/Léger