



**DuoTEMP<sup>®</sup>**   
*dual cure temporary filling material*

## Dubbele veiligheid - met een glimlach!

- Duaal uithardend
- Goede randaansluiting
- Makkelijk te verwijderen
- Een materiaal voor vele indicaties

**DuoTEMP is een dual uithardend, eugenolvrij, röntgenopaak, wit vulmateriaal, gebaseerd op zinkoxide/zinksulfaat, voor een optimale bescherming tegen de infiltratie van bacteriën. DuoTEMP is één van de eerste materialen, die zowel met licht als door speekselcontact uitharden. Deze oplossing biedt een grotere flexibiliteit en maakt het voor de patiënt mogelijk de vulling snel te belasten. Door de aangename smaak tovert DuoTEMP een glimlach op het gezicht van de patiënt en de tandarts.**

► **Dubbele veiligheid**

• **Duaal uithardend**

Na slechts 40 s lichtuitharding kan de patiënt de vulling belasten, terwijl de vulling door speeksel verder uithardt.

• **Goede randaansluiting dankzij geringe expansie**

Reduceert infiltratie van bacteriën in de caviteit.

► **Een materiaal voor vele indicaties**

Verkleint de praktijkinventaris en maakt de productkeuze makkelijker

- Tijdelijke vullingen van klasse I en II caviteiten
- Tijdelijke vullingen in de endodontie
- Tijdelijke vullingen van inlay- en onlay-preparaties

► **Natuurlijk gevoel ondanks vulling**

Door de hoge oppervlaktehardheid voelt DuoTEMP aan als een natuurlijke tand. Daardoor ontstaan geen irritaties en geniet de patiënt een maximaal comfort.

► **Extra voordelen**

- Bevat zinkoxide en fluoride voor een optimale bescherming
- Eugenolvrij - geen effect op de uitharding van composieten
- Röntgenopaak

**Bestelinformatie:**

**5830** DuoTEMP Intro Kit

2 spuitjes van 5g, Coltène Separator, intra-oraal 5ml

**5831** DuoTEMP Single Pack


1 spuitje van 5g

**7090** DuoTEMP Eco Pack

5 spuitjes van 5g

**7235** Coltène Separator, intra-oraal 5ml

► **Vergelijking van de randaansluiting**

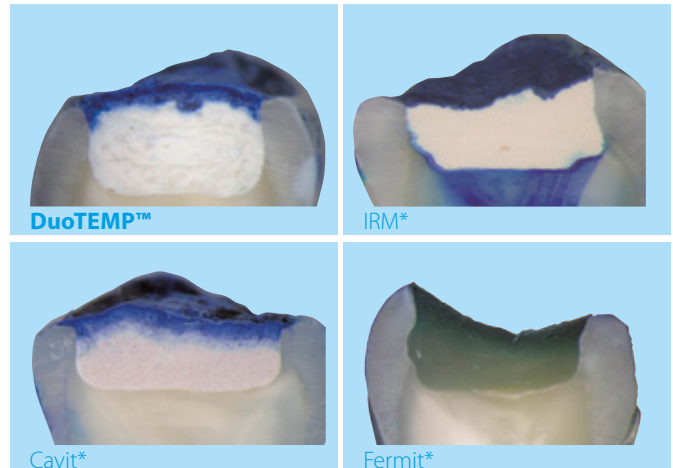

Doorsnede van een geëxtraheerde molaar, met DuoTEMP gevuld en na uitharding in methyleenblauw gelegd om de randaansluiting te testen. DuoTEMP vertoont een uitstekende randaansluiting.

Bron: interne gegevens.

\* zijn geen handelsmerken van Coltène/Whaledent

► **Eenvoudige, tijdbesparende toepassing**



Eén component, zonder mengen. Goede hechting in de caviteit. Makkelijk te verwijderen.