


SCHAREN

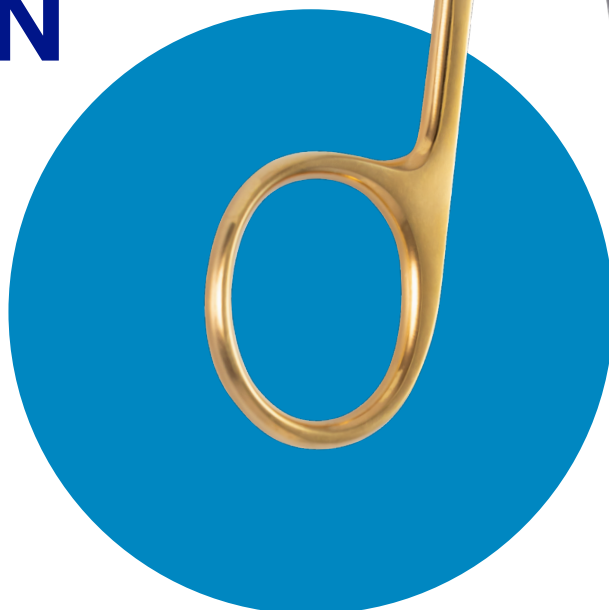

Onze maximumprecisiescharen zijn vervaardigd overeenkomstig de hoogste eisen van chirurgisch vakmanschap.

Door de zorgvuldige handafwerking en de licht flexibele lagering van het scharnierend gedeelte verzekeren de scharen van American Eagle **nauwkeurige incisies in het snijvlak over de hele lengte van het lemmet.**

De snij-instrumenten van American Eagle zijn gemaakt van gehard staal om stabiliteit en duurzaamheid te garanderen.

SuperCut-scharen: dankzij de speciale slijpwijze van de lemmeten kunt u met deze schaar even fijn, zuiver en precies snijden als met een scalpel. Eén lemmet is voorzien van microvertanding en werkt ondersteunend zodat u **zacht weefsel en hecht materiaal stevig kunt vasthouden.** Het tegenoverliggende vlijmscherpe SuperCut-lemmet zorgt ervoor dat het zachte weefsel niet uitrafelt en nauwkeurig kan worden gecontoureerd.

AESSIRS	Irisschaar, recht, 11 cm De irisschaar, die oorspronkelijk voor oogheekkundige ingrepen is ontworpen, heeft bijzonder fijne lemmeten.
AESSIRSSC	Irisschaar, recht, 11 cm SuperCut
AESSIRC	Irisschaar, gebogen, 11 cm
AESSIRCSC	Irisschaar, gebogen, 11 cm SuperCut
AESLGC	La Grange S-vormige schaar, SuperCut 11,5 cm De S-curve van de La Grange-schaar volgt maximaal de orale anatomie, waardoor het verwijderen van hechtingen op moeilijk bereikbare plaatsen gemakkelijker wordt. SuperCut-slijpwijze.

AESSSUTS	Spencer onthechtingschaar, recht, 12,5 cm Speciaal ontworpen voor het verwijderen van hechtingen: een van de lemmeten heeft een kleine haak waarmee u hechtingen stevig op hun plaats kunt houden vóór het doorsnijden. Het korte lemmet maakt nauwkeurig en efficiënt snijden mogelijk.
AESSGFSSC	Goldman-Fox-schaar, recht, SuperCut, 13 cm Scharen van Goldman-Fox zijn speciaal ontworpen voor tandheelkundige chirurgie. Ze hebben lemmeten met fijn bewerkte punten en een robuust gedeelte aan de achterkant van de snijkant: dit betekent dat de punt met maximale precisie kan worden gebruikt op de moeilijkst bereikbare plaatsen. SuperCut-slijpwijze.
AESSGFSCC	Goldman-Fox-schaar, gebogen, SuperCut, 13 cm Gebogen versie voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.
AESSMETSSC	Metzenbaum-dissectieschaar, gebogen, SuperCut, 14 cm Metzenbaum-scharen hebben korte, fijne lemmeten met afgeronde punten. Ze minimaliseren het risico om per ongeluk zacht weefsel op moeilijk bereikbare plaatsen te verwonden.
AESSUFSC	Ultra fijne schaar, SuperCut De ultrafijne scharen van American Eagle bieden het beste van twee werelden: de precisie van een microschaar en het vertrouwde gebruik van een standaard-schaar. Dankzij de ultrafijne werkuiteinden kunt u in weefsel snijden met een precisie die vergelijkbaar is met die van een microschaar. Door de SuperCut-slijpwijze van een van de lemmeten kunnen incisies net zo gemakkelijk en precies worden gemaakt als met een scalpel. Het tweede lemmet is voorzien van microvertanding en zorgt ervoor dat zacht weefsel en hecht materiaal stevig kunnen worden vastgehouden. Het vlijmscherpe SuperCut-lemmet voorkomt dat zacht weefsel gaat uitrafelen en biedt maximale bescherming. Gebogen variant voor betere toegang tot moeilijk bereikbare plaatsen.