



OPTIMA EndoActivE+

Ultrasonic Endo Activator
BAE320



Ergonomisch & Comfortabel design

Drie Powerlevels:

E1, E2 en E3, variërend van laag tot hoog vermogen.

Vier Tijdmodi:

Laat de ultrasoon 10 seconden, 15 seconden, 20 seconden of 10 minuten draaien.

10s

15s

20s

10 min


Twee Modi:

- 1) Stand-by gebruiksklare modus
- 2) Irrigatiemodus.

Zeer functioneel ontwerp Efficiëntere irrigatie

Slimme microcomputerbesturing

EndoActivE+ zendt hoogfrequente ultrasone trillingen uit die inwerken op de kop van het handstuk, waardoor de tip gaat trillen. Deze trilling verbetert veilig en effectief de endo-irrigatie die in de endodontologie wordt gebruikt.

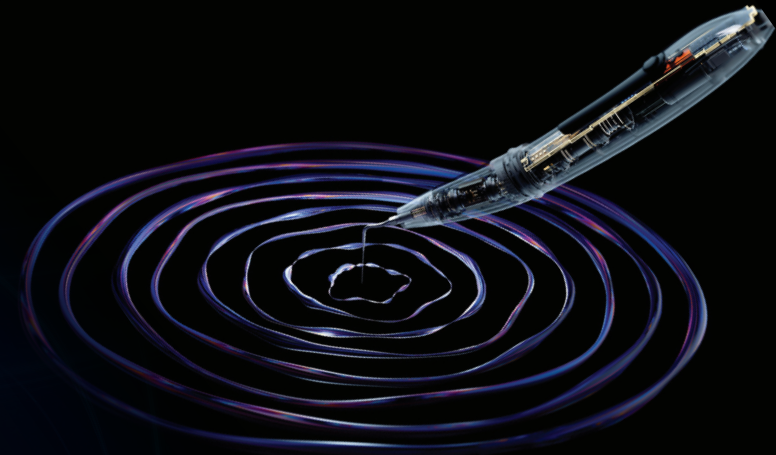

Draadloze controle Gebruiksvriendelijke bediening

Draadloos gebruik & draadloos oplaadstation: geen stekkers
of snoeren.

Magnetisch zuigcontact verbindt het handstuk met het station.

Compact en licht voor eenvoudige irrigatie.



Duidelijk LCD-scherm Gemakkelijkere observatie

Duidelijk, groot, gemakkelijk af te lezen display voor
betere observatie van de energiemodus en timing
van het apparaat.

Ringschakelaar Bedieningsknop

Schakelt het apparaat in en uit en stelt de gebruiker
in staat om te schakelen tussen vermogensniveaus
en tijdmodi, samen met de hoofdschakelaar.

Vergemakkelijkt de endodontische behandeling
door toegang te bieden tot verschillende hoeken en
verschillende elementposities.



Stabiele Prestaties

De juiste trillings-amplitude zorgt voor consistente stabiele aflezingen.

Hoogwaardige, zeer efficiënte tips van titanium-legering met lage vibratie zorgen voor een betrouwbare irrigatie.

Intelligente tracking

Volautomatisch frequentietrackingsysteem
Zoekt automatisch naar de beste werkstatus



Compatibele tips



BAE70



BAE71



BAE72



BAE96



BAE99

Hoge configuratie: BAE96×2, BAE99×2, BAE70×2, BAE71×10, BAE72×10

Compatibele tips: BAE70, BAE71, BAE72, BAE96, BAE99

Voor kanaalirrigatie na de wortelkanaalpreparatie

BAE70: Endochuck, gebruikt voor installatie BAE71, BAE72, voor wortelkanaalreiniging of irrigatie

BAE71, BAE72: Polymeer materiaal zonder snijvermogen

BAE96: 20#, taper 2%, tipeinde lengte 21mm, Roestvrij staal

BAE99: 25#, taper 2%, tipeinde lengte 18,5mm, Titanium legering



B.A. International

Henry Schein Dental
Veluwezoom 16, 1327 AG Almere
088 0077 101
info@henryschein.nl
www.henryschein.nl

